

TR 2810 Duschpanel

Bruksanvisning – svenska



Läs alltid igenom denna bruksanvisning noggrant innan du börjar använda duschpanelen. Vårdgivaren skall alltid ha tillgång till denna bruksanvisning.

Denna duschpanel är endast avsedd för professionellt bruk där vårdtagaren är under uppsikt av vårdgivaren.

Användarinstruktioner och rekommenderade underhållsrutiner beskrivs på följande sidor

Om du har frågor angående drift eller underhåll av din duschpanel och inte hittar svaret i denna bruksanvisning, vänligen kontakta oss.

Systemet är konstruerat för många års problemfri drift, förutsatt att det används och underhålls på rätt sätt.

Endast kvalificerad personal som förstår alla drifts- och säkerhetsrutiner får använda denna utrustning.



Läs alltid bruksanvisningen

Se alltid till att du har rätt version av manualen och läs användarinstruktionerna innan du använder utrustningen för första gången.



Registrerad hos Läkemedelsverket i Sverige som en MDR-klass 1-produkt enligt MDR 2017/745. TR förbehåller sig rätten att göra konstruktionsändringar och/eller förbättringar utan föregående meddelande.

Innehållsförteckning

Tillverkare	Sida 3
Introduktion	Sida 4
Avsedd användning	Sida 5
Avemballering	Sida 5
Installationsinstruktioner	Sida 6
Säkerhetsinstruktioner	Sida 8
• Vid olycka	Sida 8
Kalibrering	Sida 9
• Rengöring av insprutningsmunstycke	Sida 9
Termostatblandare	Sida 10
Funktioner och styrning	Sida 11
Produktbeskrivning	Sida 12
Teknisk specifikation	Sida 13
Användning	Sida 14
• Duscha vårdtagaren	Sida 14
• Rengöring av utrustningen	Sida 15
• Tillval, digital termometer för duschslangen	Sida 16
• Tillval, mekaniskt lås för tvättmedelsbehållaren	Sida 16
Systemets komponenter	Sida 17
• Termostatblandare	Sida 17
Produktetikett	Sida 18
Tabell med symboler	Sida 19
Underhållsrutiner	Sida 20
Före varje användning	Sida 20
Månatligt underhåll	Sida 20
Årligt underhåll	Sida 20
Underhåll vart 3:e år	Sida 20
Underhåll vart 5:e år	Sida 20
Rengöringsinstruktioner	Sida 21
Avfallshantering / Återvinning	Sida 21
Underhållsprotokoll	Sida 22
Utbildningsprotokoll	Sida 23

Tillverkare



TR Equipment AB
Rundelgatan 2
SE-573 35 Tranås Sverige

Telefon: +46 (0)140 77 00 40
www.trequipment.com
info@trequipment.se

Systerbolag:

USA
TR Group Inc.

Tyskland:
TranspoRehamed GmbH

Telefon: +1 (800) 7526900
www.trequipment.com
information@trequipment.com

Telefon: +49 (0) 212-645850-0
www.transporehamed.de info@transporehamed.de

Introduktion

Käre kund,

Tack för att ni har valt en produkt från TR Equipment AB. Vi hoppas att ni kommer att trivas med duschpanelen TR 2810.

Denna bruksanvisning ska, i kombination med personalutbildning, säkerställa att operatören/användaren alltid använder och/eller hanterar TR 2810 på rätt sätt.

Nya medarbetare måste utbildas av kvalificerad och erfaren personal.

TR Equipment AB kräver att varje användare har läst, förstått och att denna bruksanvisning är känd för dem. De ska kunna tillämpa anvisningarna enligt beskrivningen. Detta gäller alla som inte var närvarande vid introduktionen.

Denna bruksanvisning skall finnas tillgänglig för alla användare. Vi förespråkar att man beställer fler manualer.

Beställ gärna ett nytt exemplar från oss om bruksanvisningen har förkommit eller blivit oanvändbar, eller om den med tiden har blivit oläslig.

Om ni har frågor om produkten, tveka inte att kontakta TR Equipment AB eller någon av våra kvalificerade samarbetspartner.



Läs alltid bruksanvisningen

Se alltid till att du har rätt version av manualen och det är obligatoriskt att läsa den
Läs igenom bruksanvisningen innan du använder utrustningen för första gången.



Varning

- Obligatorisk att läsa bruksanvisningen innan du använder utrustningen.
- Säkerhetsställ att du har läst, förstått och tillämpat informationen på följande sidor innan du använder duschpanelen.

Avsedd användning

- TR 2810 är en väggmonterad duschpanel avsedd för duschning av patienter.
- Rengöringsenheten på TR 2810 är avsedd för rengöring av annan utrustning efter att vårdtagaren har duschat.
- Den tänkta vårdtagaren är en person som inte kan ta hand om sin personliga hygien.
- Användaren är en vuxen person som kan läsa och förstå bruksanvisningen och som är kvalificerad att ta hand om beroende personer/patienter.
- TR 2810 är avsedd att användas i ett duschutrymme tillsammans med vår duschstol TR 1000 och våra duschvagnar TR 2000, TR 3000, TR 4000 och TR 4200.

Avemballering

När du får en duschpanel från oss är den förpackad i en kartong.

Öppna kartongen försiktigt. Använd INTE några vassa verktyg som kan repa duschpanelen.



Varning

- För att förhindra risken för kontaminering får badkar, toalett, bidé eller liknande produkter inte installeras inom räckhåll för Patientduschslangen.

Viktig


- Innan TR 2810 tas i bruk måste användaren läsa och förstå bruksanvisningen.

Installationsinstruktioner

VVS – Duschaggregat

Alla rör, kopplingar, backventiler, vakuumbrytare, avstängningsventiler och anslutningar till Duschpanelen måste levereras och installeras i enlighet med lokala föreskrifter. Vi hänvisar till den europeiska standarden EN 1717.

Duschpanelen för patienter har en termostatblandare (1), en huvudventil för ON/OFF (2) på panelens framsida och ett duschhandtag (3) utan ON/OFF-knapp.

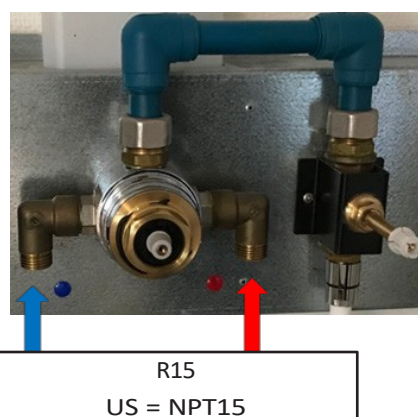

Termostatblandaren har inbyggda filter och backventiler. Den är dessutom fabriksinställd för att ge en vattentemperatur på högst 38 °C i duschen.

Termostaten ska anslutas till R15 (½") / US = NPT15 för anslutning till kallt och hett vatten (se bild).

För att undvika rörskräp är det viktigt att varm- och kallvattenledningarna spolas noggrant innan anslutning till duschpanelen.

Utför ett anti-skållningssäkerhetstest före första användningen:

- Öppna duschventilen (2). Ställ in temperaturen med vredet på Termostatblandaren (1).
- När vatten rinner ut ur duschhandtaget (3) ska du stänga AV kallt vatten tillförseln till termostatblandaren. Inom 2 sekunder ska termostatblandaren stängas AV.
- Om termostatblandaren fortsätter att endast leverera hett vatten måste termostatblandaren bytas ut. Använd INTE badkaret förrän termostatblandaren har bytts ut.



Varning

- För att förhindra risken för kontaminering får badkar, toalett, bidé eller liknande produkter inte installeras inom räckhåll för patientens duschslang.

Installationsinstruktioner

VVS – Rengöringsenhet

Desinfektionssystemet har en gul duschslang och en huvudsäkerhetsventil på framsidan av duschpanelen samt ett rengöringshandtag utan ON/OFF-knapp. Säkerhetsventilen kan öppnas med nyckeln, som är monterad på en kedja fäst på sidan av duschpanelen.



R15
US = NPT15

- Rengöringsduscher ska anslutas till en R15 (1/2") / US = NPT15 anslutning för kallt vatten och, vid behov, till en separat "Klass A-tank".
- Den koncentrerade rengöringsvätskan är förinställd för att ge en blandning på cirka 2 % i rengöringsduschen och rengöringsflaskan ska fyllas via locket. Se bruksanvisningen.
- För att undvika rörlagringar är det viktigt att varm- och kallvattenledningarna spolas noggrant innan anslutning till duschpanelen.
- Rekommenderad monteringshöjd från golvet: 1 250 mm.



Viktig

- Denna bruksanvisning tillhör kunden och måste förvaras tillsammans med produkten för underhåll och drift.


Säkerhetsinstruktioner

De rekommenderade underhållsrutinerna beror på vattnets hårdhet. Inledningsvis bör dessa rutiner utföras en gång i veckan. Underhållsfrekvensen kan sedan anpassas utifrån driftsförhållandena.

Duschpanelen får inte användas om fel upptäcks. Omedelbar service krävs! Följ alltid

rengöringsinstruktionerna för utrustningen.

- Säkerhetsställ att båda ventilerna (2 och 5) på panelens framsida är stängda efter varje användning.
- Säkerhetsställ att flaskan (8) är fylld med koncentrerat rengöringsmedel innan rengöring.
- Säkerhetsställ att slangar, reglage, anslutningar och blandare är fria från skador.
- Duschpanelen får inte användas om defekter upptäcks. Omedelbar service krävs.
- Undvik att rengöringsmedlet, som är starkt frätande, kommer i kontakt med huden eller ögonen. Vid kontakt, skölj omedelbart med rikligt med vatten. Om irritation uppstår, kontakta läkare. Läs alltid och följ anvisningarna från tillverkaren av rengöringsmedlet.

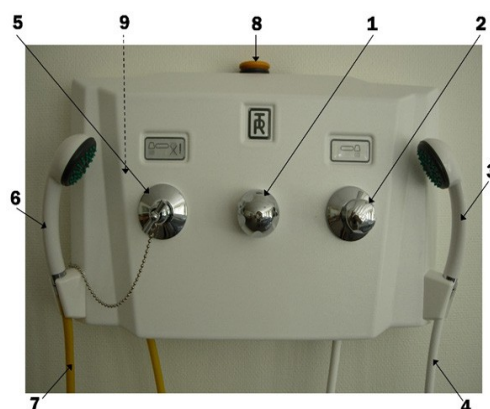

Om du har frågor om drift eller underhåll av din duschpanel TR 2810 och inte hittar svaret i denna bruksanvisning, kontakta oss gärna!

I händelse av olycka eller tillbud

Notera:

Om en allvarlig incident inträffar vid användning av TR 2810 ska detta anmälas till Tillverkaren och till de lokala myndigheterna där du är etablerad.



Varning

- Kontrollera alltid vattentemperaturen manuellt före och under duschen och se till att termostatblandaren fungerar korrekt.
- För att förebygga risken för kontaminering får badkar, toalett, bidé eller liknande produkter inte installeras inom räckhåll för patientduschslangen.
- Innan TR 2810 tas i bruk måste användaren läsa och förstå bruksanvisningen.
- Endast kvalificerad personal som förstår alla drifts- och säkerhetsrutiner får använda duschpanelen.

Kalibrering



Rengöring av injektorn

Rengöringsmedlet blandas automatiskt med vattnet i en förinställd blandning på cirka 2 %, som ställts in vid tillverkningen. Om en alternativ kalibrering behövs, följ instruktionerna nedan för att uppnå en blandning på 2 % eller den blandning som rekommenderas av din leverantör av rengöringsmedel.

För att utföra kalibreringen av blandningsinställningsskruven (9) på injektorn inuti panelen behövs en tunn skruvmejsel, ett måttglas med en volym på minst 20 cl/8 ounces och en hink med en volym på minst 10 liter/3 gallons.

Blandningen ska kalibreras enligt anvisningarna från tvättmedelsleverantören.

- Ta bort det vita plastlocket.
- Töm tvättmedelsflaskan genom att lossa slangen från injektorn. När flaskan är tom ansluter du slangen till injektorn igen.
- Fyll måttkoppen med 20 cl/8 ounces koncentrerat tvättmedel, öppna locket (8) på tvättmedelsflaskan och häll det i flaskan.
- Håll rengöringssprutens handtag (6) med den gula slangen över 10-litershinken för påfyllning.
- Vrid rengöringssäkerhetsventilen (5) till helt öppet läge och spraya in i hinken.
- Håll koll på nivån när hinken fylls samtidigt som flaskan töms. Hinken ska nå 10L/3 gallons-markeringen samtidigt som flaskan töms. Om hinken fylls först, vrid inställningsskruven för tvättmedelsblandningen (9) något moturs med skruvmejseln. Om flaskan töms först, vrid inställningsskruven för tvättmedelsblandningen (9) något medurs.
- Upprepa steg A–F tills blandningen är som önskat.
- Stäng rengöringssäkerhetsventilen (5) och sätt tillbaka rengöringshandtaget (6) i fästet på sidan av panelen.
- Sätt tillbaka det vita plastlocket.
- Desinfektionssystemet är nu klart för användning.
- När rätt koncentrationsinställning har fastställts krävs ingen ytterligare kalibrering såvida inte ett annat rengöringsmedel används.

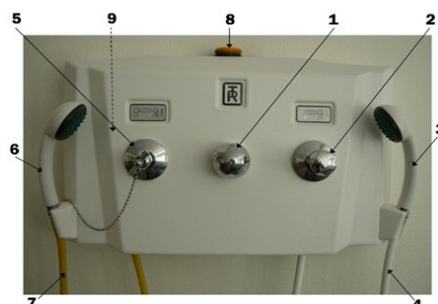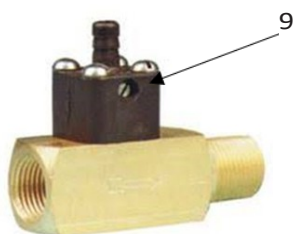

Varning

- Undvik hud- eller ögonkontakt med rengöringsblandningen, som kan vara starkt frätande. Läs alltid och följ tvättmedelsleverantörens anvisningar noggrant.

Termostatblandare


Den termostatblandaren är fabriksinställd på max. 38° vid leverans.

Om termostatblandaren behöver utföras en kalibrering vid installation eller service ska du följa anvisningarna i produktmanualen för Rada-serierna 215 och 222 (medföljer vid leverans).

Utför ett anti-skållningssäkerhetstest före första användningen:

Om termostatblandaren fortsätter att endast leverera hett vatten måste termostatblandaren bytas ut. Använd INTE badkaret förrän termostatblandaren har bytts ut.

215 and 222 Series

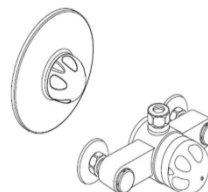


Important! This Manual is the property of the customer and must be retained with the product for maintenance and operational purposes.

Product Manual

rada

Funktioner och styrning

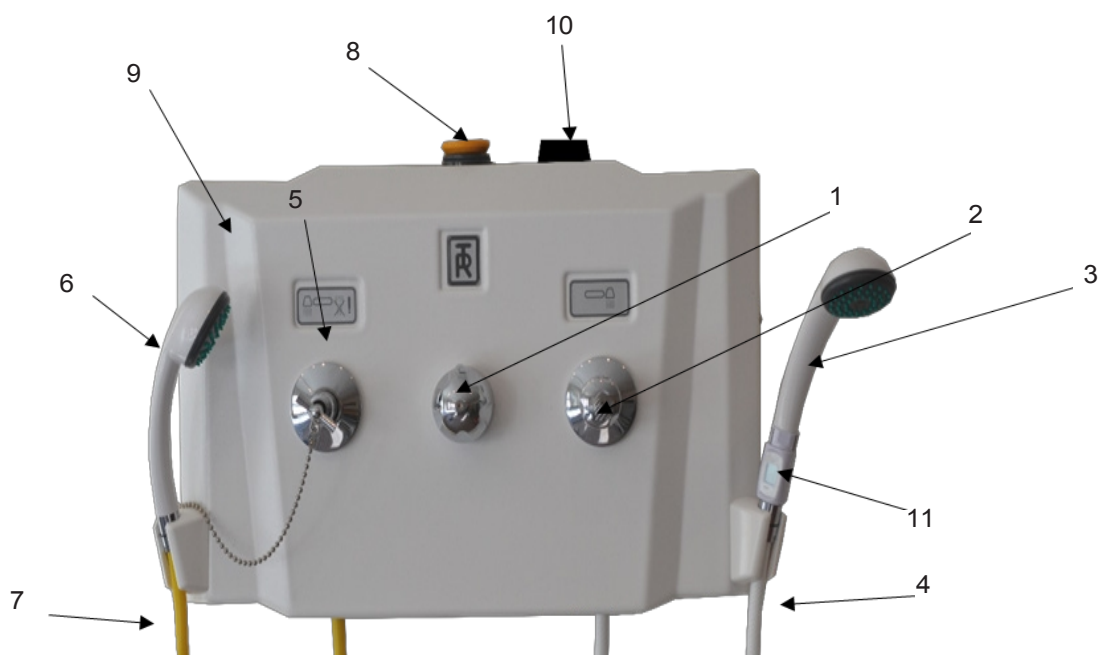

1	Termostatblandare
2	Duschventil
3	Duschhandtag
4	Vit duschslang
5	Säkerhetsventil, Rengöring
6	Rengöring av duschhandtaget
7	Rengöring, gul duschslang
8	Rengöringsmedel, påfyllning
9	Rengöring av insprutningsmunstycket (bakom locket)
10	Tillval, mekaniskt lås för tvättmedelsflaska
11	Tillval, digital termometer

Produktbeskrivning

TR 2810 – Duschpanel

TR 2810 är en väggmonterad duschpanel med en separat enhet för rengöring. TR 2810 är avsedd för duschning av patienter och för rengöring av hjälpmedel såsom duschvagnar och duschstolar.

- Som standard är TR 2810 utrustad med
- 1 st termostatblandare
- 1 st duschventil
- 1 st vit Duschslang
- 1 st. rengöringsventil
- 1 st. Vakuumbrytare för rengöringsenheten
- 1 st. Injektor till rengöringsenheten
- 1 st. Tvättmedelsbehållaren till rengöringsenheten
- 1 st gul desinficerings slang
- 2 st Duschhandtag
- 1 st Säkerhetsnyckel till ventilen för rengöring.

Tillval

- Mekaniskt lås för rengöringsbehållaren
- Termometer för duschslang




Teknisk specifikation

TR 2810 – Duschpanel	
Bredd	580 mm / 23"
Höjd	360 mm / 15"
Djup	130 mm / 5"
Min. dynamiskt vattentryck	0,15 bar
Max. dynamiskt vattentryck	5 bar
Max. statiskt vattentryck	10 bar
Rekommenderad monteringshöjd från golvet	1250 mm / 49"
Fabriksinställd blandning, rengöringsmedel	Cirka 2 %

Teknisk livslängd	10 år om produkten sköts och underhålls enligt anvisningarna i denna bruksanvisning.
-------------------	--

Transport och förvaring Omgivningstemperatur	-20 °C – +70 °C -4 °F – +158 °F
---	--------------------------------------

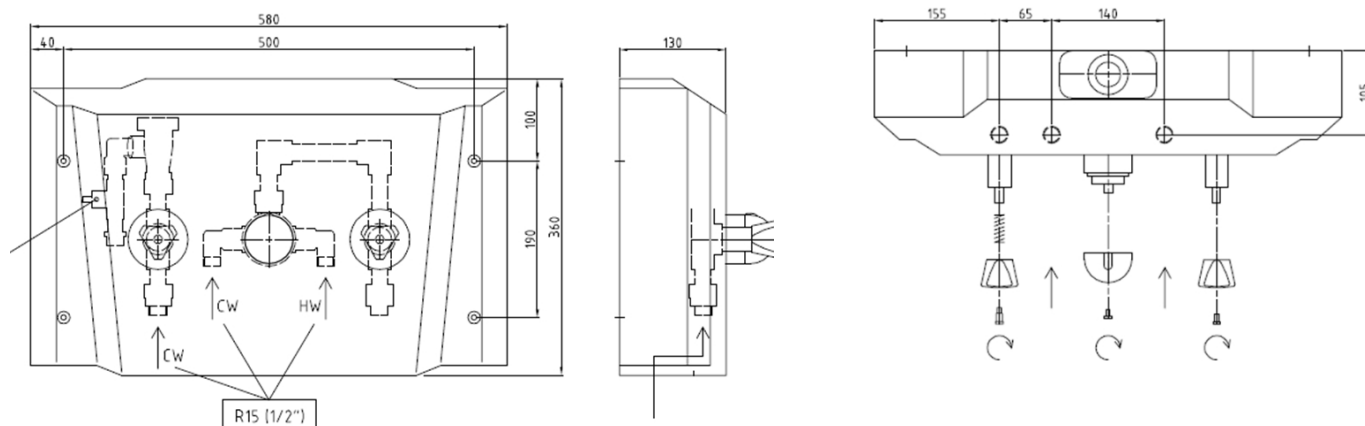

Användning

Duscha vårdtagaren


Dusch-/tvättpanelsystemet har en termostatblandare för reglering av vattentemperaturen och en ventil för patientens duschhandtag.

Duschpaneler i kombination med en duschvagn.

Den termostatblandaren (1) sitter i mitten på panelen och duschventilen (2) samt patientens duschhandtag (3) sitter på panelens högra sida.

- Ta bort duschhandtaget (3) med den vita duschslangen (4) från fästet och håll det över Duschvagnen, bort från patienten.
- Öppna duschventilen (2).
- Ställ in termostatblandaren (1) på en lämplig temperatur. Kontrollera vattentemperaturen genom att hålla armen under strålen och justera termostatblandaren (1) vid behov.
- Justera vattenflödet med duschventilen (2).
- Duscha, tvätta med schampo och skölj sedan av patienten med duschhandtaget (3).
- Stäng duschventilen (2) efter duschen och sätt tillbaka duschhandtaget i fästet på höger sida av panelen.

Duschhandtaget används även för att skölja av duschvagnens liggplatta och madrass före rengöring med rengöringsmedel.

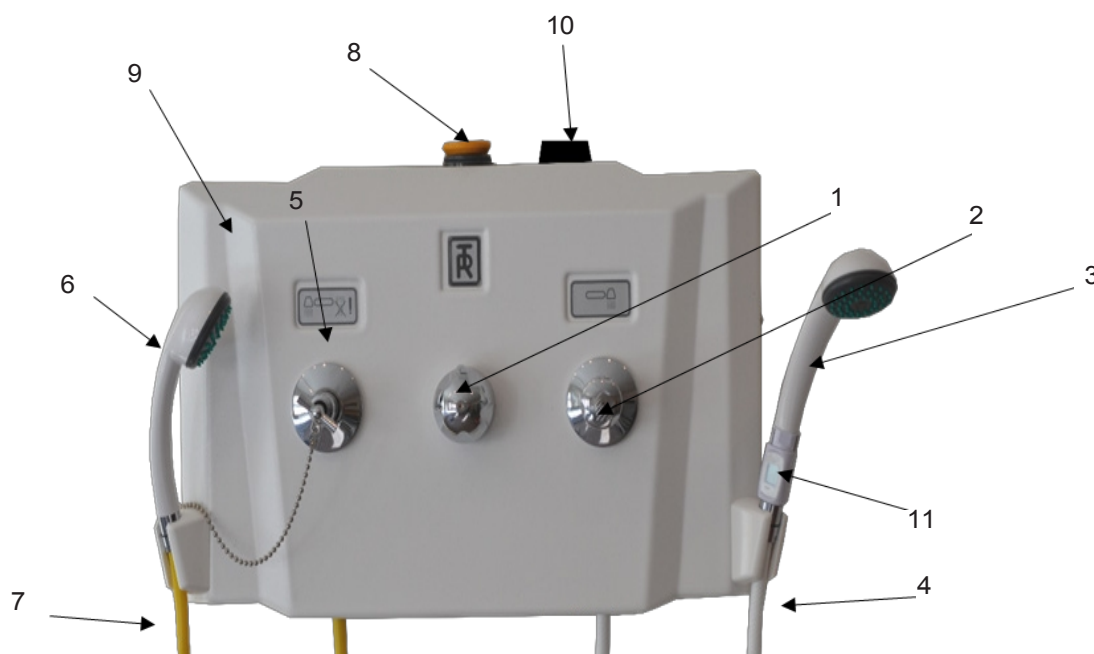

Varning

- Kontrollera alltid vattentemperaturen med handen eller en badtermometer innan du duschar vårdtagaren. Detta för att förhindra att vårdtagaren skållas eller får en chock av hett eller kallt vatten.


Användning

Rengöring:

Rengöringssprutens handtag (6) med den gula duschslangen (7) sitter i ett fäste på panelens vänstra sida. Kallt vattenflödet, som syftar till att minimera inandningen av ångan från det blandade rengöringsmedlet, regleras av en säkerhetsventil (5) som sitter på panelens vänstra sida. Rengöringsmedlet blandas automatiskt med kallt vatten vattnet i en förinställd koncentration på ca 2 %, vilket bestäms av en blandningsinställningsskruv (9) på injektorn inuti panelen. Om en annan kalibrering krävs, se separat beskrivning. Beroende på rengöringsmedlets viskositet, vattenflödet och vattentrycket i byggnaden kan det vara nödvändigt att justera och kalibrera systemet för att få önskad blandning av det koncentrerade rengöringsmedlet och vattnet.

Användning:

- Fyll flaskan (inuti panelen) med (1,5 liter/0,4 gallon) koncentrerat rengöringsmedel.
- Lås upp det mekaniska låset (10) för rengöringsmedlet med nyckeln och vrid sedan på vredet 45° (tillval).
- Lyft försiktigt upp flaskan rakt uppåt och ta av locket (8).
- Efter påfyllning, sätt fast flaskans lock och sätt tillbaka flaskan på sin plats.
- Ta bort rengöringshandtaget (6) med den gula slangen (7) från fästet på vänster sida av panelen och håll det över duschvagnen, om sådan används.
- Öppna säkerhetsventilen (5) med nyckeln till vänster på panelen och spraya kort den kalla rengöringsblandningen på utrustningen samtidigt som du observerar rengöringsblandningen med avseende på färg, lukt eller skumbildning.
- Rengör utrustningens alla ytor. Ta bort rester och smuts med en trasa eller borste.
- Stäng säkerhetsventilen genom att vrida nyckeln innan du sätter tillbaka duschhandtaget i fästet.
- Använd patientduschhandtaget (3) för att skölja av alla ytor med rent vatten.

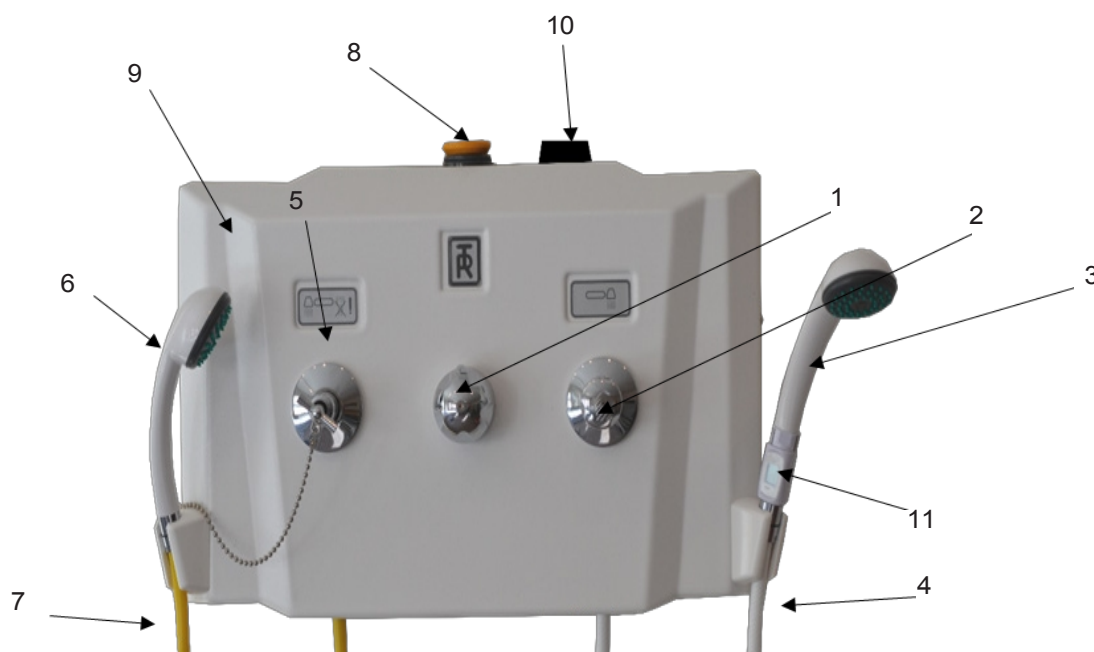

Varning

- Använd aldrig den gula desinficeringsslangen för att duscha en patient. Den får endast användas för rengöring av utrustning.
- Undvik hud- eller ögonkontakt med rengöringsmedel, som kan vara starkt frätande. Läs alltid noggrant igenom och följ leverantörens anvisningar för rengöringsmedlet. Vid kontakt, skölj omedelbart med vatten. Om irritation uppstår, kontakta läkare.

Användning

Tillval – Digital termometer för duschslangen

Den enkla konstruktionen möjliggör snabb och enkel installation på några minuter. Den vattentäta LCD-skärmen och den universella anslutningen gör att den kan installeras i de flesta duschinstallationer. Termometern är batteridrivnen och batterier medföljer vid leverans.

För att starta termometern från energisparläget räcker det att skaka enheten eller vända den upp och ner.

Installation

- Ta bort duschhuvudet och duschslangen.
- Fäst duschslangstermometern på duschslangen.
- Sätt fast duschhuvudet på toppen av duschslangstermometern.



Temperaturintervall	0 °C – 69 °C.
Noggrannhet	± 1 °C (mellan 25 °C och 50 °C).
Gångor	½" BSP utvändig (slang) och ½" BSP invändig (duschhuvud).
Larm	Synligt larm vid temperaturer över +41 °C
Artikelnummer:	819359

Tillval – Mekaniskt lås för tvättmedelsbehållaren

Det mekaniska låset (inkl. nycklar) för tvättmedelsbehållaren är ett fabriksmonterat tillval. Syftet är att förhindra att obehöriga tar bort flaskan.

Så här öppnar du det mekaniska låset:

- Öppna låset med en av nycklarna.
- Vrid vredet 90°.



- Sats med backventiler för att förhindra återflöde.
- Ska placeras vid varm- och kallvattenanslutningarna.
- Art.nr. 0520073




Systemets komponenter

Termostatblandare

Den fabriksmonterade termostatblandaren reglerar vattentemperaturen och vattenflödet för duschen. Se separat bruksanvisning, medföljer vid leverans. TR Equipment hänvisar till den separata bruksanvisningen för termostatblandaren. När underhållsrutiner ska utföras, läs kapitlet Underhållsrutiner och den ursprungliga bruksanvisningen för termostatblandaren.

215 and 222 Series

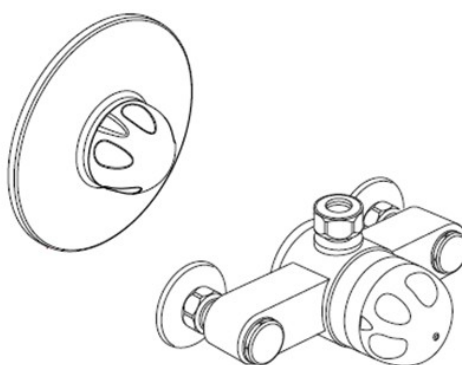

Important! This Manual is the property of the customer and must be retained with the product for maintenance and operational purposes.

Product Manual


rada



Viktig

- Om termostatblandaren levereras av TR Equipment omfattas den av garantin. Problem relaterade till vattenkvaliteten omfattas inte av garantin från TR Equipment.

Produktetikett

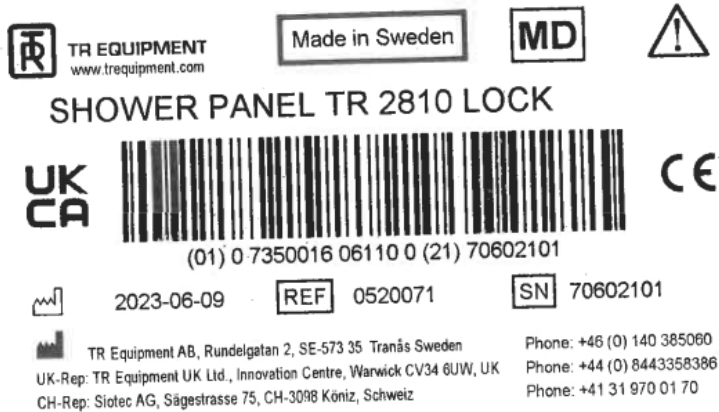

UDI (Unique Device Identification) finns i den läsbara texten i streckkoden. Den innehåller:

- (01) EAN-kod
- Tillverkningsdatum. Datumformatet är ÅÅÅÅMMDD, där Y = år, M = månad och D = datum.
- Serienummer som visas som en sexsiffrig kod.



Produktetikett

Tabell med symboler

 TR EQUIPMENT	TR Equipment-Logotyp		Visuell inspektion
	Produkten följer krav i det medicintekniska regelverket 2017/745 (MDR)		Läs användarinstruktionerna
	CE-märkning		WEEE-symbol Kan inte kasseras som hushållsavfall
	Tillverkningsdatum		Storbritannien
	Bolagsadress		Se bruksanvisningen (IFU)
	Artikelnummer		Rengöringsmedel Max 1,5 l / 0,4 gallon
	Serienummer		Rengöringsventil
	Duschventil		

Underhållsrutiner

Före varje användning

- Säkerhetsställ att duschslangen är i gott skick och inte läcker.
- Säkerhetsställ att desinficeringsslangen är i gott skick och inte läcker.
- Säkerhetsställ att anslutnings- och duschslangar inte läcker.
- Rengör silen på duschhandtaget genom att gnugga den med tummen.



Månatligt underhåll

- Säkerhetsställ att anslutningsslangarna sitter ordentligt och inte läcker.
- Kontrollera att alla skruvar är åtdragna.
- Prova termostatblandaren för att säkerställa att det varma vattnet har en säker temperatur. Detta beskrivs i produktmanualen för Rada 215- och 222-serien (medföljer vid leverans).

Årligt underhåll

- Upprepa punkterna "Före varje användning" och "Månatligt underhåll".
- Kontrollera och utför rengöring av inloppsfiltren i termostatblandaren.
- Kontrollera att rengöringsinjektorn fungerar korrekt och att blandningen av vatten och rengöringsmedel är OK.
- Byt ut ventilstammen på duschventilen. Artikelnummer 829307.
- Byt ut ventilstammen på rengöringsventilen. Artikelnummer 829307.

Vart 3:e år

- Byt ut den vita duschslangen
- Byt ut den gula desinficeringsslangen
- Byt ut båda duschhandtagen

Vart 5:e år

Upprepa före varje användning, månatligt underhåll och årligt underhåll.

- Byt ut blandarkassetten
- Byt ut vakuumbrytaren

Viktig

I vårdmiljöer såsom sjukhus, vårdhem etc. och i alla andra tillämpningar där användaren utsätts för liknande risker, oavsett tillförsel- och användningsförhållanden eller resultatet av tester under drift. TR Equipment rekommenderar att kritiska komponenter, såsom blandarkassetten, byts ut med högst fem års mellanrum. Den rekommenderade frekvensen för dessa underhållsåtgärder beror på hårdheten i vattnet och hur ofta utrustningen används. Det är god praxis att införa dessa rutinåtgärder på veckobasis och sedan justera frekvensen efter vad förhållandena kräver.



Varning

- Duschslangen på TR 2810 tål 60 °C / 140 °F i 10 minuter.
- Jod, brom och metylenblått kan missfärga panelens hölje.

Viktig:

- Om termostatblandaren levereras av TR Equipment omfattas den av garantin. Problem relaterade till vattenkvaliteten omfattas inte av garantin från TR Equipment.
- Underhåll och/eller reparationer får endast utföras av tillverkaren eller av kvalificerad personal som är auktoriserad av Tillverkaren. I annat fall upphör garantin att gälla omedelbart.

Rengöringsinstruktioner

Observera: Användaren/operatören ansvarar för att välja rätt rengöringsvätska/rengöringsmedel och tillsatser i enlighet med lokala föreskrifter och säkerhetsstandarder. Läs användarinstruktionerna från leverantören av rengöringsvätskan/rengöringsmedlet och kontrollera om produkten är lämplig för användning med denna produkt.

Allmänna riktlinjer för rengöringsmedel:

- Använd inte lösningsmedelsbaserade eller starkt alkaliska vätskor för rengöring, eftersom dessa produkter kan orsaka skador.
- Icke-slipande rengöringsmedel
- Klorlösning med under 5 viktprocent klor
- Alkoholösning med under 3 viktprocent

Rengör duschpanelen efter varje användning. Undvik slipande rengöringsmedel som kan repa ytan på höljet.



Viktig:

- När du byter batterier ska du lämna in dem i enlighet med nationella bestämmelser.
- När du utbyter elektriska och elektroniska delar/komponenter ska du lämna in delarna/komponenterna i enlighet med nationella bestämmelser.



Avfallshantering / Återvinning

Återvinning av utrustningen

- Kudden och madrassen tillverkas av lackerade PVC-tyger och fyllnadsmaterialet består av polyeten/polyeter.
- Kudde ska återvinnas som brännbart material.
- Plastplattan ska återvinnas som brännbart material.
- Metaldelarna ska återvinnas i metallåtervinningen
- Hjulen är tillverkade av polyuretan och ska utgöra objektet för återvinning som brännbart material.
- Bultar ska återvinnas som metalledlar.

Återvinning av förpackningsmaterial.

- Förpackningsmaterialet består av en kartong och en träpall.
- Kartongen, kartongbotten och kartonglocket ska återvinnas som kartong och pallen ska återvinnas som trämaterial material.

Underhållsprotokoll

Utbildningsprotokoll

Tack för att du läser detta dokument.

Om du har frågor angående drift eller underhåll av din utrustning och inte hittar svaret i denna manual, tveka inte att kontakta oss!