



TR 3200

Batteridrivnen Duschvagn

Hygiene Equipment
Designed for People

Mångsidig duschvagn med oändliga tillämpningsmöjligheter

Batteridrivnen höj- och sänkbar duschvagn är en utmärkt lösning för att förhindra ryggskador och för att minimera statisk belastning hos vårdgivaren. Möjliggör en säker och ergonomisk arbetsställning för en bättre arbetsmiljö.

TR 3200 är unik med sina stora arbetsyta och de sidomonterade lyftpelarna tillåter en större överlappning mellan madrassen och säng för en kortare och säkrare överflyttning av patienten. Fungerar även att använda som skötbord, akut-omklädnings- eller transportvagn. Ingen förutbestämd huvudsida och med sina dubbla avlopp och flyttbar huvudkudde elimineras risken för att behöva backa ut och vända vagnen innan patient överflyttning.

TR3200 har en max patientvikt 230 kg och finns tillgänglig i två storlekar. Båda versionerna finns tillgängliga med fasta eller löstagbara, uppladdningsbara batterier.



Registrerad hos Läkemedelsverket
som Klass 1-produkt i enlighet med
MDR 2017/745.

TR Equipment förbehåller sig rätten
att när som helst göra ändringar
eller tillägg i bruksanvisningen.



Specifikationer

Längd:	Standard 1950 mm, Large 2150 mm
Bredd:	Standard 695 mm, Large 795 mm med sidogrindarna i uppfälld position
Höjd:	Min. 500 mm, Max. 900 mm
Max. patientvikt:	230 kg
Materialbehandling:	Pulverlackerat rostfritt stål
Hjul:	4 st 100 mm tvillinghjul. Samtliga bromsade alternativt två bromsbara hjul och två med rakstyrning
Handkontroll:	För höjdjustering samt tiltning
Madrass, Kudde:	Blå i flamsäkert PVC material
Batteri:	Fast: 2 x 24 V / 7 Ah, Löstagbart: 24 V, 4 Ah
Kapslingsklass:	IPX5



TR EQUIPMENT



TR 3200

Batteridrivnen Duschvagn

Hygiene Equipment
Designed for People




Egenskaper

- Tyst elektrisk höjdjustering; min 500 mm; max 900 mm.
 - Max patient vikt, 230 kg.
 - Bred liggyta; 640 alternativt 740 mm bred.
 - Ren enkel konstruktion för snabb och enkel rengörning.
 - Sidomonterade lyftpelare för kortare och säkrare överflyttning av patienten.
 - Madrass med dubbla avlopp och flyttbar huvudkudde för enklare överflyttning, oavsett hur patient ligger placerad.
 - Fällbara sidodgrindar som även kan fällas in för att göra duschvagnen smalare vid passage i trånga utrymmen.
 - Frigången på 160 mm från golv tillåter överföring från mobila lyftar.
 - Liggplattan kan enkelt tippas till "Trendelenburg" position för patienter i chock.
 - Chassi och liggplattans ram är tillverkat av rostfritt stål.
 - Ljudsignal indikerar låg batterinivå.
 - Kilkuddar, 15 och 30 grader finns som tillbehör.
-
- Alla modeller levereras med batteriladdare, madrass, kudde och 1 m avloppsslang som standard.
 - Båda versionerna, Standard och Large, finns tillgängliga med fasta eller löstagbara, uppladdningsbara batterier.
 - Liggplattan har motkörningsskydd i alla fyra hörn för att skydda väggar och dörrkarmar.




Handkontroll för höjd/tiltjustering.

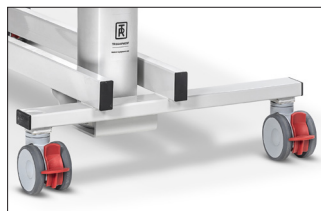

100 mm tvillinghjul som standard.
2 bromsade och 2 med rakstyrning
alt. 4 bromsade hjul.



Flexibel avloppsslang med slanghållare.

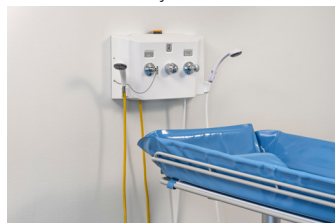


TR3200 med TR2810 Duschpanel.

Art. nr.	Modell
0532000-4B	TR 3200 inkl. fasta batterier, 1950x 695 mm
0532010-4B	TR 3200-L inkl. fasta batterier, 2150 x 795 mm
0532005-4B	TR 3200-R inkl. löstagbara batterier, 1950 x 695 mm
0532015-4B	TR 3200-LR inkl. löstagbara batterier, 2150 x 795 mm

Tillval

- Kilkuddar, 15 och 30 grader för att uppnå en mer upprätt position.
- Alla modeller kan levereras med blå (standard) eller grå kudde.
- Längre avloppsslang 2,5 m, i stället för 1 m som är standard.

Dimensioner (mm)

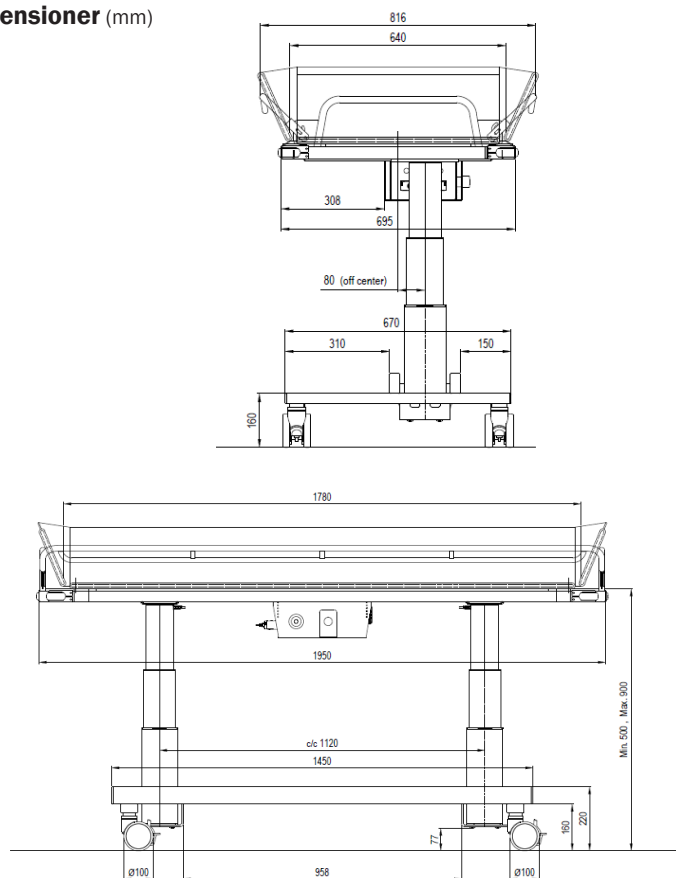

Huvudkontor

TR Equipment AB, Sweden
Telefon: +46 140 38 50 60
E-post: info@trequipment.se
www.trequipment.com

Dotterbolag

TR Group Inc, US, Telefon: +1 (800) 752 6900
TRanspoRehaMed GmbH, Germany, Telefon: +49 (0) 212 645850-0



TR EQUIPMENT