



TR 2810

Duschpanel

Hygiene Equipment
Designed for People

TR 2810 Kompletta duschsystem, med termostatisk blandningsventil

TR 2810 är en duschpanel med termostatisk shuntventil och ett separat rengöringssystem som tillsammans med TR duschvagnar uppfyller ett komplett duschsystem. Detta system innebär att vården är bekväm, säker och hygienisk för både patient och vårdgivare. Rengöringssystemet körs på kallt vatten för att minimera inandning vid rengöring av utrustningen, panelen har en inbyggd flaska för rengöring av tvättmedel. TR 2810 finns med mekaniskt lås på vätskebehållaren (tillval).



Registrerad hos Läkemedelsverket
som Klass 1-produkt i enlighet
med MDR 2017/745.

TR Equipment förbehåller
sig rätten att när som helst
göra ändringar eller tillägg i
bruksanvisningen.



Specifikationer

Bredd:	580 mm
Höjd:	360 mm
Djup:	130 mm
Rekommenderad monteringshöjd från golv:	1250 mm
Min. Dynamiska vattentryck:	0,15 bar
Max. Dynamiska vattentryck:	5 bar



TR EQUIPMENT



TR 2810

Duschpanel

Hygiene Equipment
Designed for People

Funktioner

Lättmanövrerad

- Lättmanövrerad tack vare tydlig och ren design.

Rengöringssystem

- Integrerat hygieniskt och säkert rengöringssystem för enkel rengöring av utrustning.

Rengöringsmedel

- Inbyggd flaska för rengöringsmedel som automatiskt blandas med kallt vatten i rengöringssystemet.

Duschslangstermometer

- Termometer på duschslangen finns som tillval för att avläsa duschtemperatur.

Varm- och kallvattenförsörjning för patientdusch

- Termostatisk blandare
- Ventil för patientdusch
- Handtag för dusch
- Patientduschslang, vit

Kallvattenförsörjning, för rengöring


- Säkerhetsventil för rengöring av utrustning.
- Rengörande sprayhandtag. Obs: Får aldrig användas på patienter.
- Rengöringsduschslang, gul.
- Rengöringspåfyllnad.
- Rengöringsventil inuti panelen.

Tillval

- TR 2810 finns med mekaniskt lås på vätskebehållaren.

Art. nr.	Modell
0520070-02	TR 2810 Duschpanel med termoskopisk blandare
0520071	TR 2810 Duschpanel med termoskopisk blandare, med lås på desinfektions flaskan

Dimensioner (mm)

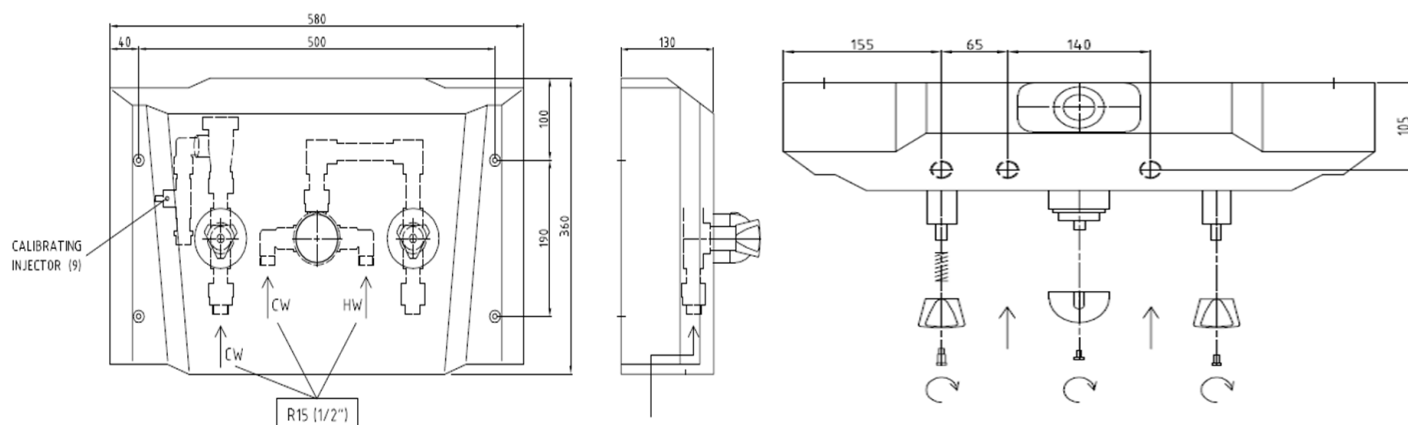

Huvudkontor

TR Equipment AB, Sweden
E-post: +46 140 38 50 60
Mail: info@trequipment.se
www.trequipment.com

Dotterbolag

TR Group Inc, US, Telefon: +1 (800) 752 6900
TRanspoRehaMed GmbH, Germany, Telefon: +49 (0) 212 645850-0



TR EQUIPMENT