



TR 3000 Model 2021

Batteridrivnen Duschvagn

Hygiene Equipment
Designed for People

Mångsidig duschvagn med oändliga möjligheter för både patient och vårdgivare

TR 3000 är en batteridrivnen duschvagn utrustad med fotreglage för elektrisk höj- & sänkning vilket är en utmärkt lösning för att förebygga ryggsador samt minimera statisk belastning hos vårdgivaren.

Duschvagnen är unik med sin sidomonterade lyftpelare vilket gör det möjligt att få en större överlappning mellan madrassen och sängen. Detta innebär en kortare och säkrare överflyttning av patienten och ger även vårdgivaren en mer ergonomisk ställning.

TR 3000 har ingen förutbestämd huvudsida. Dubbla avlopp och flyttbar huvudkudde är ovärderliga och tidssparande funktioner för vårdgivaren som slipper backa ut och vända vagnen innan överflyttning.

TR 3000 finns tillgänglig i tre olika storlekar.

Alla modeller finns tillgängliga med antingen fasta eller löstagbara batterier.



Registrerad hos Läkemedelsverket
som Klass 1-produkt i enlighet med
MDR 2017/745.

TR Equipment förbehåller sig rätten
att när som helst göra ändringar
eller tillägg i bruksanvisningen.



Specifikationer:

Längd:	Standard = 1900 mm, Kort = 1600 mm, Lång= 2100 mm
Bredd:	Alla modeller 640 mm
Höjd	Min. 600 mm, Max. 900 mm
Max Patient vikt:	200 Kg
Chassi/ram:	Pulverlackerat rostfritt stål
Frigång från golv:	160 mm (höjden tillåter överföring från mobila lyftar)
Hjul:	4 bromsade dubbelhjul. 100 mm som standard (Rakstyrningshjul finns tillgängligt som tillval)
Höjdjustering:	Fotreglage för höj- & sänkning. (Handkontroll tillgänglig som tillval)
Madrass, kudde:	Blå i flamsäkert PVC material, Madrass med dubbla avlopp
Tilt:	Manuell tilt-justering på båda sidorna, +/- 4 grader
Batteri:	Fasta 24 V , 7 Ah. / Löstagbara LiON 24 V, 5 Ah. Varningssignal vid låg batterinivå
Elsäkerhetsklass	Komplett enhet IPX5 (Handkontroll och löstagbara batterier IPX6)



TR EQUIPMENT



TR 3000 Model 2021

Batteridrivnen Duschvagn

Hygiene Equipment
Designed for People

Funktioner

- Tyst och jämn rörelse vid höj- & sänkning.
- Varningssignal vid låg batterinivå.
- Enkel konstruktion för snabb och smidig rengöring.
- Madrassen är enkel att avlägsna.
- Sidomonterad lyftpelare för kortare och säkrare överflyttning av patienten. Foldable side rails for efficient and safe patient transfer and transport.
- Max patient vikt: 200 kg.
- 3 olika modeller tillgängliga för att passa i olika miljöer.
- Madrass med dubbla avlopp och flyttbar huvudkudde för enkel överflyttning oavsett hur patienten ligger placerad.
- Fällbara sidogrindar för säker transport samt för att göra duschvagnen smalare vid passage i trånga utrymmen.
- Frigången på 160 mm från golvet tillåter överföring från mobila lyftar.
- Liggplattan kan enkelt tippas åt båda håll till "Trendelenburg" position för patienter i chock.
- Chassi och ramen till liggplattan är tillverkade av pulverlackerat rostfritt stål.
- Liggplattan har motkörningshjul i alla fyra hörn för att skydda väggar och dörrkarmar.

- Bevisat hög kvalitet på alla komponenter garanterar en låg ägandekostnad.
- Alla modeller levereras med madrass, huvudkudde, 4 bromsade hjul och 1 m flexibel avloppsslang med hållare, som standard.

Tillval

- Kilkudde 15°, finns tillgänglig i blå, grå och gul.
- Alla modeller kan levereras med grå eller gul huvudkudde stället för blå som är standard.
- Längre avloppsslang, 2,5 m, istället för 1 m som är standard.
- Handkontroll som komplement till fotreglage. (Mycket enkel installation)
- Rakstyrningshjul (standardvagnen levereras med 4 bromsade hjul)
- Löstagbara batterier.
- Fästen/remmar för att kunna fästa madrassen i sidogrindarna.

Art. nr.	Modell
0540000	TR 3000 1900 x 640 mm
0540005	TR 3000-S 1600 x 640 mm
0540006	TR 3000-L 2100 x 640 mm



Utrustad med fotreglage för elektrisk höj- & sänkning som standard.
Handkontroll finns som tillval.
(Mycket enkel installation)



Levereras med 4 bromsade dubbelhjul som standard (100 mm)
Rakstyrningshjul finns som tillval





Levereras med fasta batterier som standard.
Löstagbara batterier går att välja som tillval.



Motkörningshjul i alla fyra hörnen för att skydda väggar och dörrkarmar.

Dimensioner (mm)

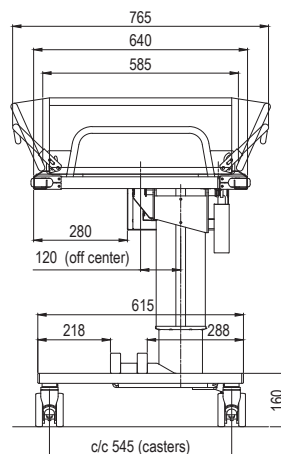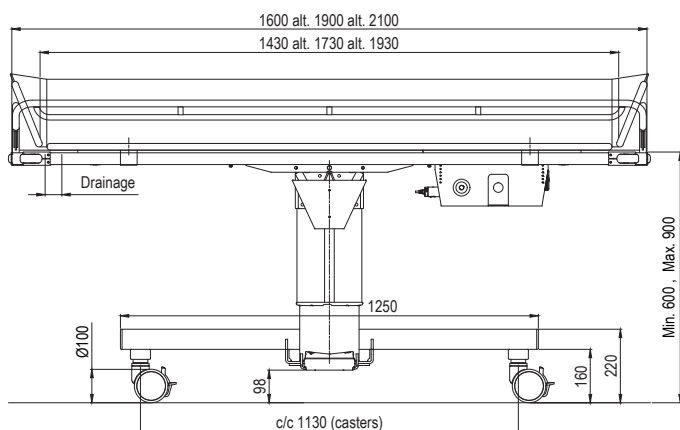

Huvudkontor
TR Equipment AB, Sweden
Telefon: +46 140 38 50 60
E-post: info@trequipment.se
www.trequipment.com

Dotterbolag
TR Group Inc, US, Telefon: +1 (800) 752 6900
TranspoRehaMed GmbH, Germany, Telefon: +49 (0) 212 645850-0



TR EQUIPMENT