



# TR 4000

## Duschvagnar

Hygiene Equipment  
Designed for People

### TR 4000 Mångsidig - Flexibla tillämpningsmöjligheter

TR 4000 mångsidig bariatrisk duschvagn är designad för hög patientvikt och gott om utrymme för de med de största vårdbehoven. Vagnen har flera användningsmöjligheter inklusive duschning, transport och behandlingsyta. De mest utsatta områden samt slitageområden är tillverkade av pulverlackerat rostfritt stål. Effektiv laddningsfunktion tack vare den magnetiska laddaren.

Patienten kan förflyttas från säng till dusch och tillbaka igen på ett tryggt och säkert sätt. Höjden på basen möjliggör mobila lyftselar. Batteridrivna dubbla ställdon höjer och sänker liggytan enkelt och tyst med en lättanvänd handkontroll. Handkontrollen styr tiltningen i båda riktningarna för förbättrad dränering och lutar till ett "Trendelenburg"-läge när så önskas. En ljudsignal indikerar när liggytan är i plant läge.



#### Specifikationer

|                     |   |
|---------------------|---|
| Längd:              | 2210 mm   |
| Bredd:              | 915 mm  |
| Höjd:               | 535 - 835 mm  |
| Max. patientvikt:   | 450 kg  |
| Materialbehandling: | Pulverlackerat rostfritt stål   |
| Hjul:               | 4 st 100 mm tvillinghjul.<br>Samtliga bromsade alternativt två bromsbara hjul och två med rakstyrning |
| Handkontroll:       | För höjjustering samt tiltning  |
| Madrass, Kudde:     | Blå i flamsäkert PVC material   |
| Batteri:            | Fast: 2 x 24 V / 7 Ah, Löstagbart: 24 V, 4 Ah   |
| Kapslingsklass:     | IPX5  |



Registrerad hos Läkemedelsverket  
som Klass 1-produkt i enlighet  
med MDR 2017/745.

TR Equipment förbehåller  
sig rätten att när som helst  
göra ändringar eller tillägg i  
bruksanvisningen.



TR EQUIPMENT




# TR 4000

## Duschvagnar

Hygiene Equipment  
Designed for People

### Funktioner

- Liggplattan lyfts enkelt och tyst upp av två kraftfulla ställdon. Den handhållna kontrollen styr tiltningen i båda riktningarna och höjer och sänker vagnen.
- Liggplattan kan lätt lutats till "Trendelenburg"-läget för att lindra en person i chock. Den justerbara höjden för liggplattan möjliggör en bekväm arbetshöjd för vårdgivaren.
- En ljudsignal indikerar att liggytan är i plant läge.
- Liggplattan har motkörningsskydd i alla fyra hörn för att skydda väggar och dörrkarmar.
- Duschvagnen levereras som standard med en mjuk flamskyddad madrass med dränering i fotändan och inkluderar avloppsslang och kudde.
- TR 4000 är tillverkad av varaktigt och tåligt material såsom pulverlackerat rostfritt eller elförzinkat stål som underlättar enkel rengöring och effektivt underhåll.
- Madrassen är löstagbar.

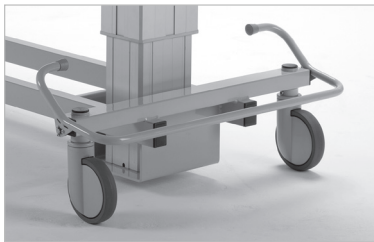

Fotkontroll för rakstyrning och bromsar.



Huvudändsgrinden viks till horisontellt position för extra längd.




Sidogrindar fälls ner eller låses i horisontellt läge för förflyttning och upprätt läge för transport.

| Art. nr.  | Modell  |
|-----------|---|
| 0521040   | TR 4000 Atlas inkl. fasta batterier, 2210 x 915 mm        |
| 0521040-R | TR 4000-R Atlas inkl. löstagbara batterier, 2210 x 915 mm |

### Tillval

- Alla modeller kommer med en blå madrass.
- Kilkuddar, 15 och 30 grader för att uppnå en mer upprätt position.
- Fästen/remmar för fastsättning av madrassen på sidogrindarna.
- Längre avloppsslang 2,5 m, i stället för 1 m som är standard.
- Löstagbart batteri 24 V / 4 Ah.

### Dimensioner (mm)

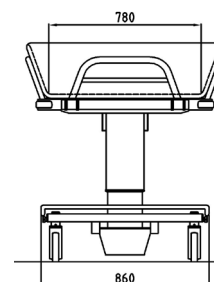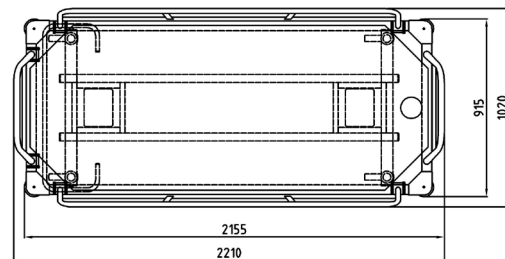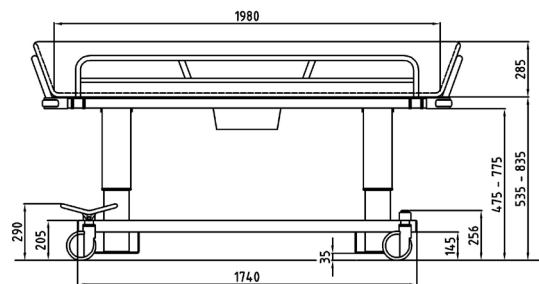

### Huvudkontor

TR Equipment AB, Sweden  
Telefon: +46 140 38 50 60  
E-post: info@treqipment.se  
[www.treqipment.com](http://www.treqipment.com)

### Dotterbolag

TR Group Inc, US, Telefon: +1 (800) 752 6900  
TRanspoRehaMed GmbH, Germany, Telefon: +49 (0) 212 645850-0



TR EQUIPMENT