



TR 4000-W

Duschvagnar

Hygiene Equipment
Designed for People

TR 4000-W Multitasking - Oändliga applikationsmöjligheter

TR 4000-W Multitasking Bariatric Duschvagn är designad för mycket kraft och gott om utrymme för de mest krävande behoven hos boende. Vagnen har oändliga applikationsmöjligheter inklusive duschning, transport och att tillhandahålla en effektiv laddnings- eller behandlingsyta. Potentiella slitområden är tillverkade av pulverlackerat rostfritt stål.



Registrerad hos Läkemedelsverket som Klass 1-produkt i enlighet med MDR 2017/745.

TR Equipment förbehåller sig rätten att när som helst göra ändringar eller tillägg i bruksanvisningen.



Boenden kan förflyttas från säng till dusch och tillbaka igen på ett säkert och tryggt sätt. Höjden på basen tillåter förflyttningar med mobil lyft. Uppladdningsbara batteridrivna dubbelaktuatorer höjer och sänker bår lätt och tyst med en lättanvänd handkontroll. Handkontrollen styr kraftlutningen i båda riktningarna för förbättrad dränering och lutar till en 'Trendelenburg'-position vid behov. En ljudsignal hörs när båren är i vågrätt läge.



TR EQUIPMENT

2024-06-19




TR 4000-W

Duschvagnar

Hygiene Equipment
Designed for People

Funktioner

- Båren höjs lätt och tyst av två kraftfulla aktuatorer. Handkontrollen styr kraftlutningen i båda riktningarna och höjer och sänker vagnen.
- Båren kan enkelt lutas till "Trendelenburg"-positionen för att lindra en person i chock. Den justerbara båren möjliggör en bekväm arbetshöjd för vårdgivaren. En ljudsignal hörs när båren är i vågrätt läge.
- Båren har gummistötfångarhjul i alla fyra hörn för att skydda väggar och dörröppningar.
- Båren levereras som standard med en mjuk flamsäker madrass med dränering i fotänden och inkluderar en dräneringsslang och kudde.
- Vagnen är tillverkad av hållbart, pulverlackerat och zinkpläterat stål, vilket gör rengöringen enkel och effektiv. Madrassen är lätt att ta bort.

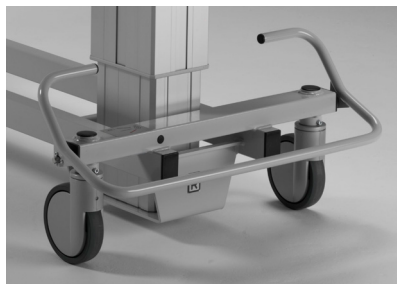

Praktisk fotkontroll för rak styrning och bromsar.



Räcket vid huvudändan fälls till horisontellt läge för extra längd.

Sidoräcken svänger ner eller låser sig i horisontellt läge för förflyttning och upprätt läge för transport.

Specifikationer

Längd	2205 mm
Width	1067 mm
Bredd	535 - 835 mm
Maximal belastningskapacitet	450 kg (patient + vatten)
Bromsstång och övre sidoräcke/hängsel	Pulverlackerat rostfritt stål
Hjul	Bromsar på samtliga fyra hjul och rak styrning
Kontroll	Handkontroll för höjdjustering och lutning
Madrass, kudde	Flamsäkert material
Batteri	Uppladdningsbart, 24 V / 7 Ah (2 st)
Tillbehör	Ryggstödsdyna
	Ryggstödsdyna 15°
	Ryggstödsdyna 30°

Tillbehör/Alternativ

- Alla modeller kommer med en blå madrass.
- Fästen/remmar för montering på madrasser till sidoräckena.
- Avtagbart batteri 24 V / 4 Ah.

Dimensioner (mm)

