



TR 4200

Duschvagnar

Hygiene Equipment
Designed for People

TR 4200, gör duschning och förflyttning enklare för vårdgivare

TR 4200 mångsidig bariatrisk duschvagn är designad för hög patientvikt och gott om utrymme för de med de största vårdbehoven. Vagnen har flera användningsmöjligheter inklusive duschning, transport och behandlingsyta. De mest utsatta områden samt slitageområden är tillverkade av pulverlackerat rostfritt stål. Effektiv laddningsfunktion tack vare den magnetiska laddaren.



Registrerad hos Läkemedelsverket
som Klass 1-produkt i enlighet
med MDR 2017/745.

TR Equipment förbehåller
sig rätten att när som helst
göra ändringar eller tillägg i
bruksanvisningen.



Patienten kan förflyttas från säng till dusch och tillbaka igen på ett tryggt och säkert sätt. Höjden på basen möjliggör mobila lyftselar. Batteridrivna dubbla ställdon höjer och sänker liggytan enkelt och tyst med en lättanvänd handkontroll. Handkontrollen styr tiltningen i båda riktningarna för förbättrad dränering och lutar till ett "Trendelenburg"-läge när så önskas. En ljudsignal indikerar när liggytan är i plant läge.



TR EQUIPMENT

2024-08-26



TR 4200

Duschvagnar

Hygiene Equipment
Designed for People

Funktioner

- Liggplattan lyfts enkelt och tyst upp av två kraftfulla ställdon. Den handhållna kontrollen styr tiltningen i båda riktningarna och höjer och sänker vagnen.
- Liggplattan kan lätt lutas till "Trendelenburg"-läget för att lindra en person i chock. Den justerbara höjden för liggplattan möjliggör en bekväm arbetshöjd för vårdgivaren.
- En ljudsignal indikerar att liggytan är i plant läge.
- Liggplattan har motkörningsskydd i alla fyra hörn för att skydda väggar och dörrkarmar.
- Duschvagnen levereras som standard med en mjuk flamskyddad madrass med dränering i fotändan och inkluderar avloppsslang och kudde.
- TR 4200 är tillverkad av varaktigt och tåligt material såsom pulverlackerat rostfritt eller elförzinkat stål som underlättar enkel rengöring och effektivt underhåll.
- Madrassen är löstagbar.



Fotkontroll för rakstyrning och bromsar.



TR4200 med TR2810 duschpanel


Specifikationer

Längd:	2150 mm
Bredd:	740 mm
Höjd:	535 - 835 mm
Max. patientvikt:	270 kg
Materialbehandling:	Pulverlackerat rostfritt stål
Hjul:	4 st 100 mm tvillingjul. Samtliga bromsade alternativt två bromsbara hjul och två med rakstyrning
Handkontroll:	För höjdjustering samt tiltning
Madrass, Kudde:	Blå i flamsäkert PVC material
Batteri:	Fast: 2 x 24 V / 7 Ah, Löstagbart: 24 V, 4 Ah
Kapslingsklass:	IPX5

Tillval

- Alla modeller kommer med en blå madrass.
- Kilkuddar, 15 och 30 grader för att uppnå en mer upprätt position.
- Fästen/remmar för fastsättning av madrassen på sidogrindarna.
- Längre avloppsslang 2,5 m, i stället för 1 m som är standard.
- Löstagbart batteri 24 V / 4 Ah.

Dimensioner (mm)

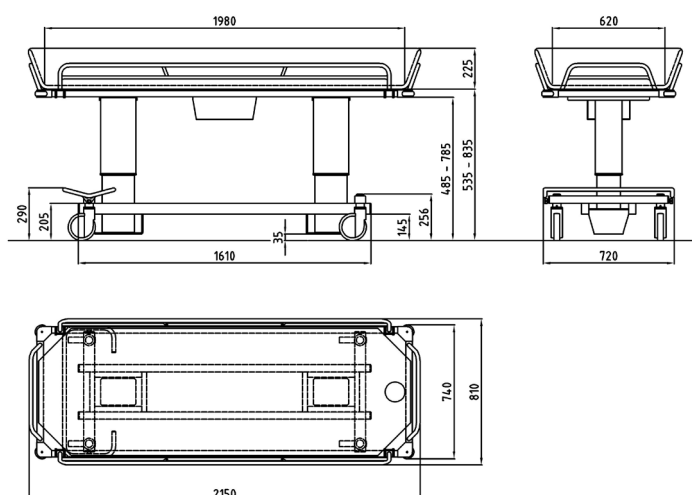

Huvudkontor

TR Equipment AB, Sweden
Telefon: +46 140 38 50 60
E-post: info@trequipment.se
www.trequipment.com

Dotterbolag

TR Group Inc, US, Telefon: +1 (800) 752 6900
TRanspoRehaMed GmbH, Germany, Telefon: +49 (0) 212 645850-0



TR EQUIPMENT