



TR 900

Höj - och sänkbart badkar

Hygiene Equipment
Designed for People

TR 900 Det arbetsvänliga badkaret

Den arbetsvänliga funktionella designen hos TR 900 med integrerat badkar och panel gör det lätt och bekvämt att använda. Den jämna och mjuka designen gör det också enkelt att rengöra och underhålla.

TR 900 Whirlpool-modellerna förbättrar patientens välbefinnande. Den avkopplande whirlpool-effekten stimulerar cirkulationen och hjälper till att rengöra patienten. TR 900 Autofill-badkarmodellerna är ännu enklare och effektivare för personalen att använda. Ingen vänte- eller observationstid vid påfyllning av badkaret.



Registrerad hos Läkemedelsverket som Klass 1-produkt i enlighet med MDR 2017/745.

TR Equipment förbehåller sig rätten att när som helst göra ändringar eller tillägg i bruksanvisningen.



Specifikationer

Längd:	2 325 mm
Bredd:	830 mm
Lyfthastighet:	11 mm/s
Max. patientvikt:	150 kg
Höjd till badkarskant:	610 - 940 mm
Strömförsörjning:	230 V, 50 Hz, 10 A
Vikt (tomt):	265 kg



TR EQUIPMENT



TR 900

Höj - och sänkbart badkar

Hygiene Equipment
Designed for People

Funktioner

- Den 3/4" (22 mm) termostatiske blandaren, 3/4" invändiga rödrördragningar och de dubbla påfyllningspiparna ger ett bra vattenflöde och kort påfyllningstid.
- Den digitala LED-termometern visar dusch- och badkars temperaturen vid påfyllning av vatten. Autofill-modellerna visar även den aktuella temperaturen på vatttnet som är i badkaret.
- Rengöringssystemet med gul slang (se bild) blandas med kallt vatten, för att minimera inandning av rengöringsblandningen, vilket är förinställt på fabriken för att undvika onödig ändring.
- Unik rengöringsadapter för whirlpool modeller. Med whirlpoolmodellerna kan du reglera både strålriktning och luftmängd.
- Den extra bredden på badkaret i huvudändan ger mer utrymme för armar och axlar och är en fördel vid schamponering. Badkaret har dubbelt lager med fiberglas för att minimera värmeförlusten. TR 900 levereras med justerbart fotstöd som standard.



TR 900 Autofill modell



TR 900 Cleaning modell



Alla TR 900 HiLo paneler kan levereras med badkar i rostfritt stål som tillval. Badkaret i rostfritt stål har samma funktionell design som standard TR 900 glasfiberkar och är tillverkad i högkvalitativt stål (EN 1.4301).

Applikationsexempel

I kombination med TR 9650 mobila Kombilyft erhålls en säker förflyttning och säkert utförande under hela badprocessen för både användaren och vårdgivaren. Användaren lämnar inte stolen eller liggplattan under hela badprocessen.




Art. nr.	Modell	
05192150	TR 900	Standard
05192160	TR 900 C	Cleaning system
05192170	TR 900 CW	Cleaning and whirlpool system
05192155	TR 900 A	Autofill system
05192165	TR 900 CA	Cleaning and Autofill system
05192175	TR 900 CWA	Cleaning, Whirlpool and Autofill system

Tillval/Accessoarer

- Transport hjulbalk och en lastramp
- Installationskit TR 900SS, TR 900SSC/TR 900SSCW
- Huvudkudde
- Lokalbehandling i kombination med Whirlpool

Dimensioner (mm)

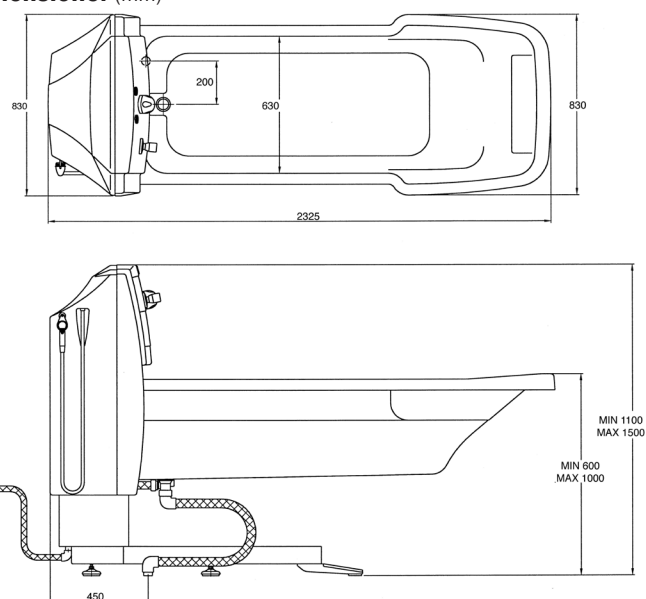

Huvudkontor

TR Equipment AB, Sweden
Telefon: +46 140 38 50 60
E-post: info@trequipment.se
www.trequipment.com

Dotterbolag

TR Group Inc, US, Telefon: +1 (800) 752 6900
TRanspoRehaMed GmbH, Germany, Telefon: +49 (0) 212 645850-0



TR EQUIPMENT