



TR 9650

Mobila badkarslyftar

Hygiene Equipment
Designed for People

TR 9650 Designad för maximal flexibilitet

TR 9650 är ett mobilt badlyftssystem som är utformat för att konverteras enkelt till olika konfigurationer för att tillgodose en mängd olika behov för patienter och boende i både akut- och långtidsvårdsmiljöer.

Oavsett om du är i stående, sittande eller liggande position TR 9650 ger en värdig helhetslösning för boende som behöver hjälp att ta sig in och ut ur badkar. Enkel åtkomst och bekväma vadderade sitttor säkerställer en trevlig badupplevelse. Ergonomiskt designade handtag och säkerhetsbälten är inbyggda i TR 9650 för att ge trygghet och trygghet för både vårdgivare och patient. TR 9650 kan konverteras mellan en stolsbadlift och en bårkonfiguration, så att individuella patientbehov av bad och lyft kan hanteras effektivt av vårdgivaren.



Specifikationer

Längd:	200 - 965 mm
Max. patientvikt:	150 kg
Materialbehandling:	Pulverlackerat, förzinkat stål och rostfritt stål
Hjul:	Dubbla Ø100 mm (4") hjul, två med bromsar och två med rak styrning
Kontroll:	Fotkontroll för höjdjustering
Stretcher, Kudde:	Flamskyddande material
Batteri:	Uppladdningsbart, 2 x 24 V / 7 Ah



Registrerad hos Läkemedelsverket, Sverige som en MD Class 1 produkt enligt MDR 2017/745..

TR Equipment förbehåller sig rätten att göra designändringar och/eller förbättringar utan förvarning.



TR EQUIPMENT

2023-12028-4




TR 9650

Mobila badkarslyftar

Hygiene Equipment
Designed for People

Funktioner


- Fotmanövrerad och höjddjusterbar gör det möjligt för vårdgivaren att hitta den mest effektiva och bekväma arbetshöjden. Det ger vårdgivaren båda händerna fria att ta hand om patienten.
- Sitt- och bårtyor tillverkade av ett mjukt, slitstarkt vattenabsorberande material som gör den lätt att rengöra, underhålla och är mycket bekväm att sitta och ligga på.
- Avtagbara sidodelar ger en enkel konfiguration från stol till bår med 3 vinklar 27, 40 eller 54 grader.
- Säkerhetsarmstödet i både stol- och bårkonfigurationer kan fällas undan för enkel åtkomst och flyttas tillbaka när patienten är på plats.
- Benkonfigurationen är designad för att enkelt komma upp på stolen och båren.
- Ett lågt chassi är designat för enkel åtkomst under sängar och badkar.
- Ett säkerhetsstopp aktiveras automatiskt om stolen eller båren sänks ner på alla ytor eller hinder.
- Ett inbyggt autostopp säkerställer att sätet och båren inte kan falla om bältet skulle gå sönder.
- Magnetisk batteriladdaranslutning utformad för att förhindra skador vid laddning.
- Ton vid låg batterinivå.
- Klar för användning efter uppackning och levereras komplett med batteriladdare och säkerhetsbälten.
- TR 9650 kan användas tillsammans med de flesta badkaren på markanden. En valfri distans kan köpas för att ändra eller förbättra placeringen av badlyften i badkaret.
- Ytterligare funktioner inkluderar fotaktiverat nödstopp, högkapacitets uppladdningsbara batterier och både låsande och rakstyrda stora hjul.
- Enkel åtkomst och bekväma vadderade sittytor säkerställer en behaglig badupplevelse.

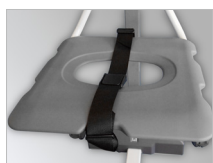

Kommodsits på stol kan göras om till slät sits med lockplacering.



Bekväma och lättstade ligg- och sittytor.

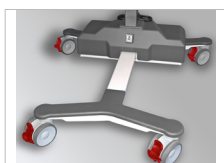

Smal chassidesign för enkla och säkra förflyttningar.



Bekvämt ryggstöd som enkelt kan flyttas till båda armarna för ryggstöd.



Fästbara sidodelar på bårn för enkel omvandling från bår till stol. Inga verktyg är nödvändiga.



Nödstoppsknapp och magnetiskt batteriladdaranslutning för säkerhet och enkel användning.

Applikationsexempel

Tillsammans med TR-badkar blir det mobila badlyftssystemet en komplett kombination som erbjuder en säker, arbetseffektiv, personorienterad badprocess med ökad vårdkvalitet.




Art. nr.	Modell
0542000	TR 9650 Stolslyft inkl. batteriladdare
0542010	TR Liggplattelyft inkl. batteriladdare
0542020	TR Kombilyft med stol inkl. batteriladdare
0542030	Två sido delar för kombilyft med stol inkl. kudde


Tillval/Accessoarer

- Avtagbar bäckensskålshållare, bäckensskål och handkontroll
- Förlängningsadapter för att öka avståndet från lyftstäng till stol/bår (60 mm)


Dimensioner (mm)

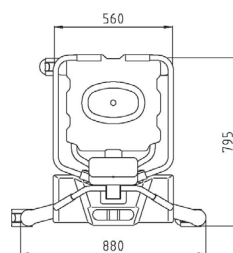

Stolslyft

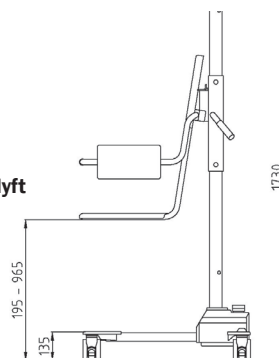

Liggplattelyft/Kombilyft

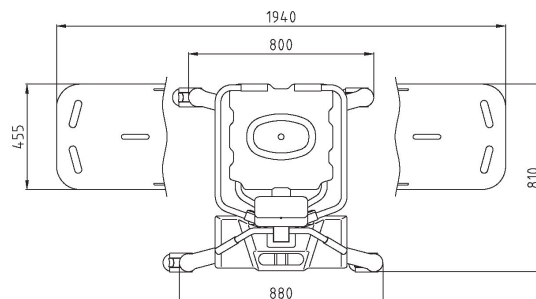

Huvudkontor

TR Equipment AB, Sweden
Telefon: +46 140 38 50 60
E-post: info@trequipment.se
www.trequipment.com

Dotterbolag

TR Group Inc, US, Telefon: +1 (800) 752 6900
TRanspoRehaMed GmbH, Germany, Telefon: +49 (0) 212 645850-0



TR EQUIPMENT